

Effiziente Lösungen für die  
mobile Notfallmedizin.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

**Rettingsprodukte**

Rollboards

Trainingsgeräte

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare

**Neu:**

## **GEL-AIR-TEC Auflagen und Sitzkissen**



**zukunftsweisende GEL-AIR-TEC Füllung**



## GEL-AIR-TEC Auflagen und Sitzkissen

Neue, innovative Füllung mit einem patentierten GEL-Lamellen-Luft-System zur Druckentlastung und für einen patientengerechten Liege- bzw. Sitzkomfort.

Eine Generation weiter bei den Themen Druckentlastung, Hygiene und Komfort für die Patienten.

GEL-AIR-TEC Auflage  
für Fahrtragen



Rückseite der GEL-AIR-TEC Auflage mit  
speziellem Reißverschluss (flüssigkeits-  
abweisend)



belastbar bis 220 Kg

### + Einsatzbereiche

- Intensivtransporte (ITW)
- Patienten mit Dekubitus Risiken
- Verlegungsfahrten bzw. Rückholeinsätze

### + maximale Hygiene

- Bezug abnehmbar und bei 95 Grad C. maschinell zu reinigen
- Bezug abwisch- und desinfizierbar\*\*\*
- Bezug dicht gegen Flüssigkeiten und Verunreinigungen (ISO 811)

### + hautfreundlicher, robuster Spezialbezug

- Zugfestigkeit: über 200 N (ISO 13934-1)
- Schwer entflammbar (BS 6807 CRIB 5)

### + 3 Jahre erweiterte Garantie

### + optimaler Komfort, hohe Druckentlastung


Diese Produkte kombinieren die Vorteile von Gel- und Luftkammer-Systemen. Gegenüber reinen Gel-Produkten ist **GEL-AIR-TEC** deutlich leichter und günstiger im Preis.

Im Vergleich mit Kaltschaum-Produkten gleicher Dicke sind die **GEL-AIR-TEC** Produkte im Sitz-/ Liegekomfort überlegen.\* Die revolutionäre Gel-Wabenstruktur gibt nur an den Druckpunkten nach.

Die Druckentlastungswerte sind beeindruckend, ebenso das Feedback von Patienten und Anwendern.\*\* Machen Sie den Sitz- oder Liegetest und überzeugen sich vom Komfort.

Wird **GEL-AIR-TEC** entlastet, nimmt der Kern sofort wieder seine ursprüngliche Form an. Die Produktreihe wird gleichzeitig als weich und dennoch auch stabil empfunden.

Der Kern ist hoch atmungsaktiv, unangenehmes Schwitzen wird so vermieden. Neben der Dekubitus-Prophylaxe bieten die Produkte einen zusätzlichen Federkomfort im Fahrzeug.

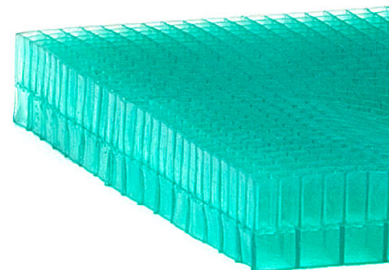

Hauptartikel	Artikel Nr.
GEL-AIR-TEC Auflage für Fahrtragen, 48 cm	12002
Flügelmatratze zur Verbreiterung auf 90 cm	12004
GEL-AIR-TEC Sitzkissen 46 cm breit	12003

Zubehör	Artikel Nr.
Ersatzbezug GEL-AIR-TEC Auflage	12461
Ersatzbezug GEL-AIR-TEC Sitzkissen 46 cm	12462
Muldenkissen Profi	11990

\* = Laut Patienten- und Anwenderbefragung: 94 % der Befragten voten für GEL-AIR-TEC.

\*\* = Eine Tabelle des Herstellers mit den Messergebnissen zur Druckentlastung ist abrufbar.

\*\*\* = Bitte die Pflegeanleitung beachten, keine chlorhaltigen Desinfektionsmittel verwenden.

Gerne beraten wir Sie zu dieser Produktlinie weiterführend. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.  
Ihr Ansprechpartner: Stefan Fischer oder Ihr zuständiger Fachberater unseres Außendienstes.

GEL-AIR-TEC wird in Deutschland exklusiv vertrieben durch Mefina Medical.  
Weitere Informationen im Internet unter: [www.gel-air-tec.de](http://www.gel-air-tec.de)

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**

Schimmelbuschstraße 31  
D-40699 Erkrath

Telefon: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 0  
Telefax: + 49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 20

E-Mail: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Internet: [www.mefina-medical.de](http://www.mefina-medical.de)