


SPACE-HALTERUNG LIGHT

Sehr leicht und trotzdem robust – mit der Neuentwicklung der Space-Halterung light setzt Mefina Medical bewusst auf die Gewichtsreduzierung beim Bau von Gerätehalterungen. ... mehr dazu auf Seite 2



C3-PATIENTENBOX-HALTERUNG

Eine **clevere** und wirtschaftliche Lösung zur Fixierung der C3-Patientenbox an der Kopfteilverlängerung von Stryker®-Tragen. ... mehr dazu auf Seite 2

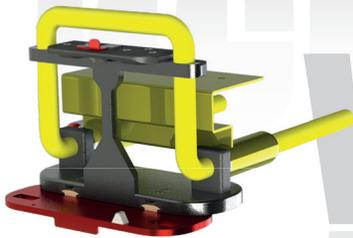

ROLLBOARD PROFI FLEX

Platzsparende Weiterentwicklung des Rollboards Profi – neben den vielen Vorteilen des bisherigen Rollboards kann es 2-fach gefaltet werden. ... mehr dazu auf Seite 2



BRAYDEN PRO

HLW-Übungsmodell mit erweiterter Feedbackfunktion. Neben dem innovativen LED-Feedbacksystem können beim Brayden Pro die trainierten Maßnahmen umfangreich ausgewertet werden. ... mehr dazu auf Seite 2



Neues
von
Mefina
Medical

SPACE-HALTERUNG LIGHT

Die **Space-Halterung light** ist äußerst kompakt und in Leichtbauweise hergestellt. Die nach unten offene Konstruktion ermöglicht ein geringes Gewicht. Der **Schutzbügel** für den Spritzenantrieb kann ebenso wie ein **integrierter Ladestecker optional** ergänzt werden.



ROLLBOARD PROFI FLEX

Das **Rollboard Profi** ist seit vielen Jahren das führende Rollboard für den Rettungsdienst und damit auch ein wichtiger Beitrag zur Arbeitssicherheit und Ergonomie.

Mit der Weiterentwicklung, dem Rollboard Profi flex, wurde eine praktische Lösung zur Unterbringung im mobilen Einsatz des Rollbords geschaffen.

So kann es zusammengeklappt an allen handelsüblichen Fahrtragungssystemen verstaut werden.



BRAYDEN PRO

Das **innovative HLW-Übungsmodell** der Firma Innosonian setzt das in den Guidelines geforderte Feedback für eine erfolgreich durchgeführte Reanimation direkt, klar erkennbar und innovativ um. Brayden stellt das Feedback als animierten Blutkreislauf mit der wichtigen Durchblutung des Gehirns dar. Dazu sind in den Übungsmodellen LED-Leuchtbänder eingebaut, die je nach Ausführung der Herzdruckmassage ein deutlich sichtbares Signal an den Übenden und den Ausbilder geben. Dies dient der Bestätigung für den Ersthelfer oder kann zur Korrektur der Maßnahmen durch den Ausbilder genutzt werden. Neben dem innovativen LED-Feedbacksystem können die trainierten Maßnahmen mit Brayden Pro umfangreich ausgewertet werden. Dazu stehen Android- und iOS-Apps zur Verfügung, die alle Parameter inklusive der Beatmung anzeigen und auswerten. Dadurch wird ein erweitertes Debriefing nach dem Training möglich. Auch die Dokumentation der Trainings, z. B. für das Qualitätsmanagement, lässt sich so umsetzen.

Gerade für erfahrene Ersthelfer (Betriebsсанitäter oder Sanitätshelfer) können mit Brayden Pro qualitativ hochwertige Trainings einfach durchgeführt werden.




C3-PATIENTENBOX-HALTERUNG

Die **Halterung** wurde von Mefina Medical zur Fixierung der C3-Patientenbox an der Kopfteilverlängerung der Tragen von Stryker[®] gemäß EN 1789 entwickelt.

Die innovative, flexible und langlebige Lösung birgt viele praktische Vorteile in der Anwendung. So lässt sich die C3-Patientenbox leicht einsetzen und ist neben der automatischen Verriegelung zusätzlich durch einen Verschluss gesichert (entspricht EN 1789). Dabei arbeitet die Sicherung mit einem Drehhebel und benötigt **keinen** zusätzlichen Gurt. Die Bodenplatte, auf der die C3-Patientenbox aufliegt, lässt sich bei entnommener Box einschieben und kann damit die Verletzungsgefahr minimieren.

Zusätzlich lässt sich durch den Mittelsteg der Halterung die Kopfteilverlängerung ohne verkanten leicht justieren.

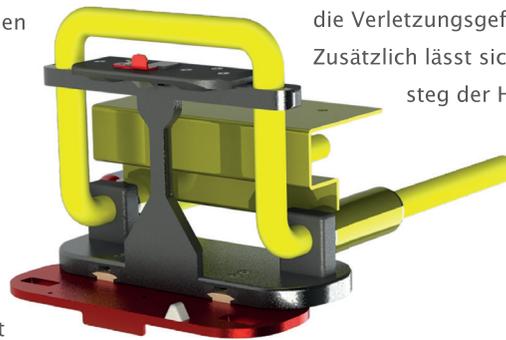

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Linz
Industriezeile 47a
A-4020 Linz
Telefon: +43 (0) 7 32 / 93 16 40
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

