

# Intensiv-Anbau-System IAS 1

robust. vielseitig. bewährt.

  
**mefina medical**<sup>®</sup>  
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

**Mobile Intensivsysteme**

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationsysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



## Intensiv-Anbau-System IAS 1


Mit **nur wenigen** Handgriffen wird mit dem **IAS 1** aus der Fahrtrage M1 ein Transportsystem zur Aufnahme und sicheren Fixierung aller benötigten Geräte und Infusionen.

Die Standardausstattung bietet Platz für ein Transport-Beatmungsgerät, einen Monitor/Defibrillator, zwei bis drei Spritzen- oder Infusionspumpen, eine Absaugpumpe sowie eine integrierte Sauerstoffversorgung mit Halterungen für zwei Flaschen à zwei Liter.

Beispielhaft können folgende Geräte integriert werden: Weinmann Medumat Transport, Dräger Oxylog 3000 plus, B.Braun Perfusor Compact und Perfusor Space, Weinmann Accuvac Pro oder Rescue, Corpus C3, Philips IntelliVue MMS X2.

Die Normschienen können in unterschiedlicher Länge und Anordnungen montiert werden. Zusätzlich lassen sich die zwei Multifunktionsstative ganz einfach wegklappen und einrasten. Durch eine spezielle Auflagematratze kann die Liegefläche auf ca. 80 cm erweitert werden.

Das **IAS 1** eignet sich für (Verlegungs-) RTW, MZF, Systeme für Katastrophenschutz, SEG und Militär sowie für innerklinische Verlegungen.

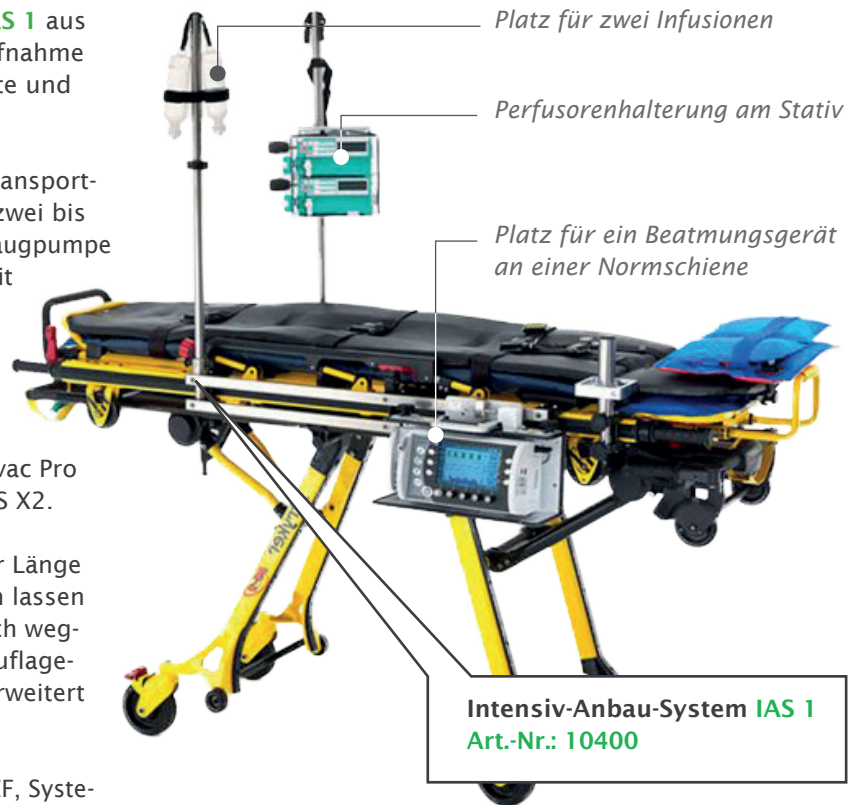

### Alle Vorteile auf einen Blick

- schnell auf- und abgerüstet
- für Patienten bis ca. 170 kg
- Gesamt-Traglast: 228 kg
- robust, stabil und langlebig
- geprüft gemäß DIN EN 1789
- bestes Preis-/Leistungsverhältnis
- umfangreiches Zubehörprogramm Z1

Gerne beraten wir Sie zu diesem Produkt weiterführend.  
**Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.**

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

#### Deutschland

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
Falkenberger Weg 42  
D-40699 Erkrath  
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0  
E-Mail: [info@mefina-medical.de](mailto:info@mefina-medical.de)  
Internet: [mefina-medical.de](http://mefina-medical.de)

#### Österreich

**Mefina Medical GmbH & Co. KG**  
**Betriebsstätte Wien**  
Tuchlauben 7a  
A-1010 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44 - 0  
E-Mail: [info@mefina-medical.at](mailto:info@mefina-medical.at)  
Internet: [mefina-medical.at](http://mefina-medical.at)

