

Geräteadapterplatte für Hesseschienen

stabil. variabel. vibrationsarm.


mefina medical[®]
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Medizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettingsprodukte


Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare

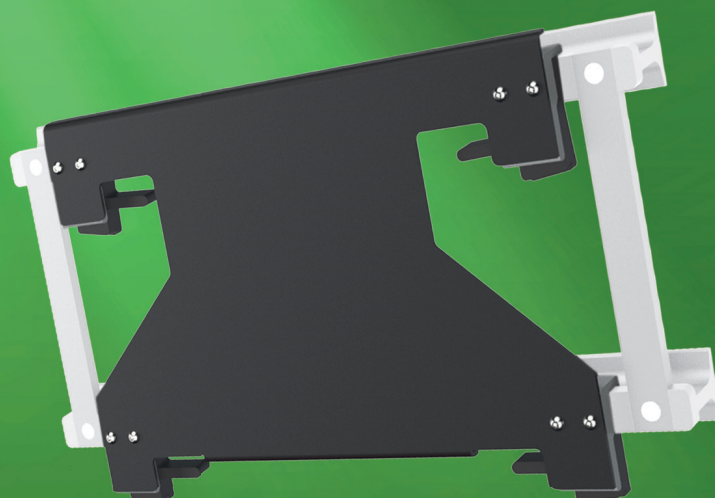

Adapterplatte für EMS-Rail Hessen

Die **Adapterplatte** dient der sicheren Montage Ihrer Geräte. An der Frontseite wird die passende Gerätehalterung für Beatmung, EKG/Defi, Absaug- oder Spritzenpumpe montiert. Die Platte wird mit entsprechenden Lochbildern geliefert. Alle Bestandteile erfüllen die DIN EN 1789:2020-12.

Optional kann rückseitig der Platte ein Netzteilhalter für 230-V- oder 12-V-Netzteile montiert werden.


Konstruiert ist die Platte für Normschienensysteme Typ „Hessen“ (Schienenabstand 200 mm), wie beispielsweise unser 1ner, 2er oder 3er Rail-System EMS-Rail „Hessen“.

Die 4-Punkt-Befestigung mittels Schnellspannklaue sorgt für eine stabile, vibrationsarme Fixierung an der Wand.

Eigengewicht: ca. 1.230 g

Belastbarkeit: bis 15 kg

Die Geräteadapterplatte passt zu gängigen Hessenschienen*.

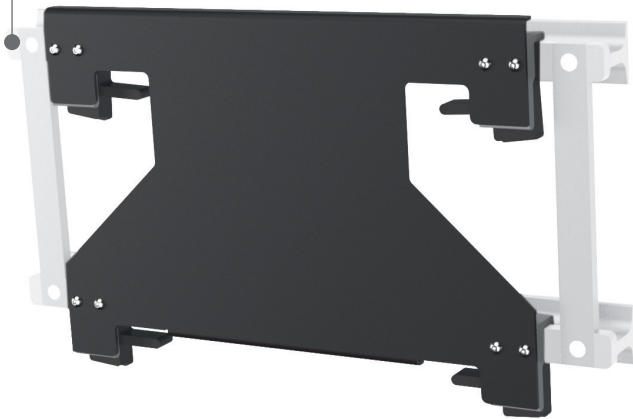

Das Beispiel einer Montage der Geräteadapterplatte an einer EMS-Rail Typ „Hessen“ (Länge: 50 cm).



Bei einer Neumontage der Hessenschienen empfehlen wir das moderne **EMS-Rail**-Schienensystem von Mefina Medical mit seinen umfassenden Vorteilen. Mehr erfahren Sie unter mefina-medical.de/geraeteschiene.html oder Sie fragen Ihren zuständigen Mefina-Fachberater. Dieser berät Sie gern und bespricht mit Ihnen die Möglichkeiten.



Der Link zum **EMS-Rail**-Schienensystem



Hersteller: Mefina Medical GmbH & Co.KG, D-40699 Erkrath. Mefina Medical und EMS-Rail sind als Marken geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Falkenberger Weg 42

D-40699 Erkrath

Telefon: +49 (0)21 04 / 833 80-0

E-Mail: info@mefina-medical.de

Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Betriebsstätte Wien

Tuchlauben 7a

A-1010 Wien

Telefon: +43 (0)1 / 3 48 77 44-0

E-Mail: info@mefina-medical.at

Internet: mefina-medical.at

Alle Vorteile der Mefina-Geräteadapterplatte auf einen Blick:

- hohe Stabilität und Belastbarkeit
- einfacher und schneller Austausch von Geräten
- vibrationsarme Fixierung der Geräte
- keine unnötigen Bohrungen in die Fahrzeuginnenwand bei einem Geräteaustausch

* Bei der Hessenschiene beträgt der Abstand zwischen den beiden Schienenelementen 20 cm.

