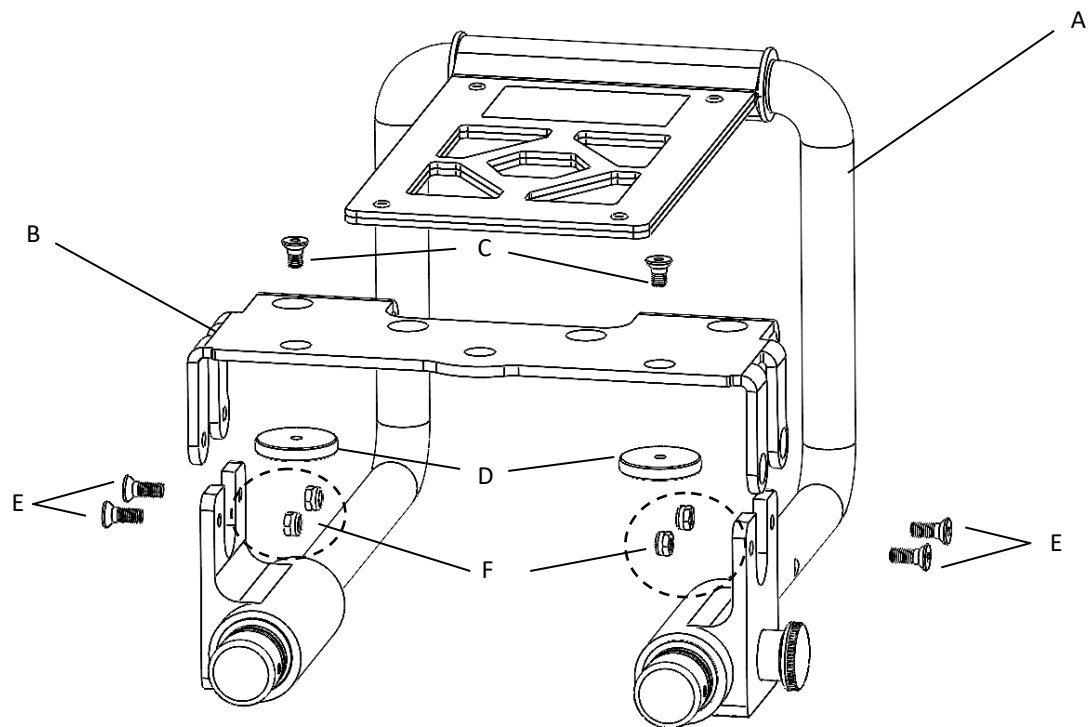


Montageanleitung Kopfteilverlängerung (KTV) für Stryker Power-PRO 2





1 Lieferumfang

Bezeichnung	Artikel	Anzahl
A	KTV-Gestänge	1
B	KTV-Befestigungsmodul	1
C	Senkkopfschraube mit Innensechskant M5 x 10	2
D	Gewindescheibe M5	2
E	Senkkopfschraube mit Innensechskant M5 x 14	4
F	Sechskantmutter mit Sicherungsring M5	4

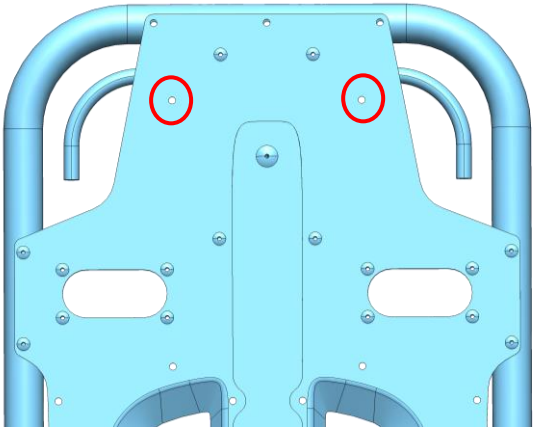
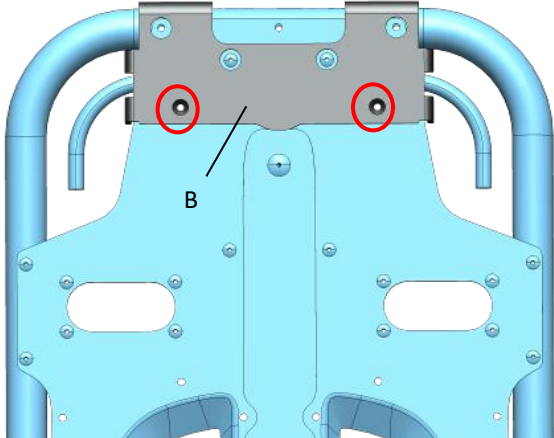
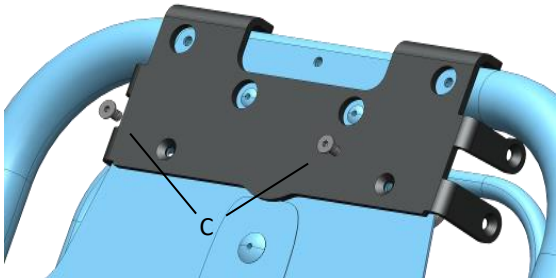
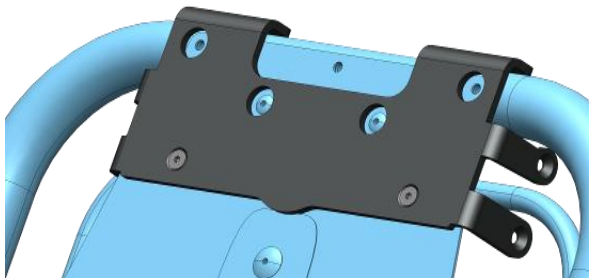
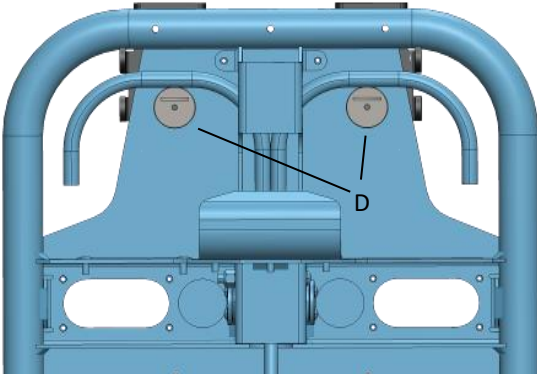
2 Benötigte Werkzeuge/Material

Inbusschlüssel Gr. 3
Maulschlüssel Gr. 8
Schlitzschraubendreher
Schraubensicherung mittelfest

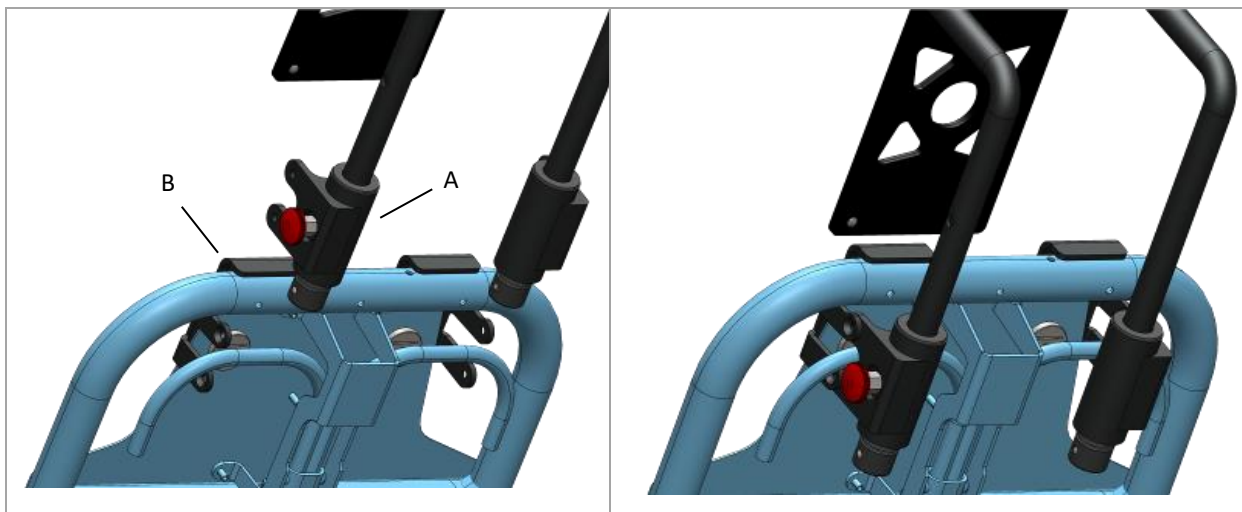


3 Montage

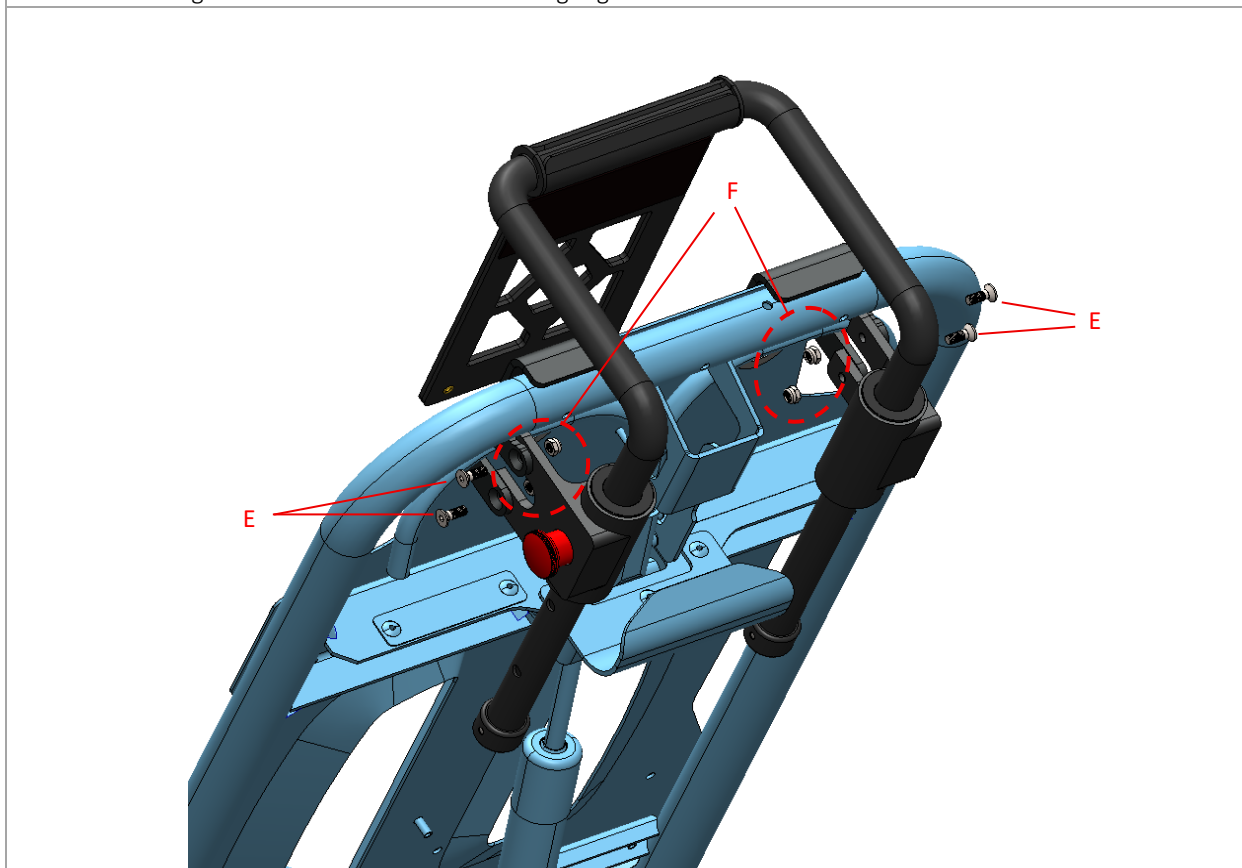
Montageschritt 1: Aufstecken und Befestigen des KTV-Befestigungsmoduls

	
• Aufstecken des KTV-Befestigungsmoduls (B) auf die Rückenlehne der Trage. Dabei ist darauf zu achten, dass die zwei Bohrungen des Befestigungsmoduls genau auf den Bohrungen der Trage (siehe rote Kreise) zu liegen kommen.	
	
	
• Hindurchführen der beiden Senkkopfschrauben mit Innensechskant M5 x 10 (C) und je 2 Tropfen mittelfeste Schraubensicherung auf die Schraubenspitzen aufbringen. • Gewindescheiben (D) von der Unterseite per Hand aufschrauben. • Zum Festziehen: Inbusschlüssel für die Schrauben (C) und Schlitzschraubendreher für die Gewindescheiben (D) verwenden und handfest anziehen.	

Montageschritt 2: Montage des KTV-Gestänges am KTV-Befestigungsmodul



- Einsetzen des KTV-Gestänges (A) an die Innenseiten des KTV-Befestigungsmoduls (B) - Laschen des Gestänges innen und Laschen des Befestigungsmoduls außen.



- Die vier Senkkopfschrauben mit Innensechskant M5 x 14 (E) von außen durch die Bohrungen in den Laschen von KTV-Befestigungsmodul und KTV-Gestänge stecken.
- Die vier Sechskantmutter mit Sicherungsring (F) aufschrauben.



Bei der Montage der selbstsichernden Sechskantmutter (F) ist darauf zu achten, dass der Kunststoffeinsatz (blauer Sicherungsring) nach außen zeigt.



Artikelnummer/-n	17216
Letzte Änderung am	01.12.2025
Version des Dokuments	1.2